

Les soins des stomies

Notre mission Coloplast :

Rendre la vie plus facile_

Votre contact
Coloplast privilégié :



Visionnez les vidéos
d'application en
scannant les QR codes
dans la brochure



L'histoire de Coloplast

L'innovation commence avec l'empathie



Tout commence en 1954, avec une infirmière nommée Elise Sørensen. Sa sœur, Thora, vient de subir une opération chirurgicale et refuse de sortir de chez elle, redoutant que sa stomie ne fuit. C'est en écoutant les difficultés de sa sœur que naît chez Elise l'idée de la première poche de stomie adhésive au monde.

En collaborant avec Elise, Aage Louis-Hansen, ingénieur civil et fabricant de plastique, et sa femme Johanne Louis-Hansen, infirmière diplômée, créent la première poche de stomie : pour aider Thora et des milliers de personnes comme elle, à reprendre une vie normale.



Une solution simple qui fait toute la différence

Aujourd'hui, les poches de stomie aident des milliers de personnes dans le monde entier à reprendre une vie normale. Notre activité comprend les soins des stomies, la continence, les soins des plaies, l'urologie interventionnelle et les soins respiratoires. Nous sommes une entreprise danoise présente dans le monde entier et employons plus de 15 000 personnes.



Sommaire

La technologie BodyFit®	4
Nouveautés	
Sensura® Mio 1 pièce Convex Fit Souple	6
Sensura® Mio Click amélioré	8
Sensura® Mio en noir	9
Gamme hospitalière	
Sensura® Mio Post Op	10
Sensura® Mio Haut Débit	12
Fistula®	14
Stomies digestives	16
Stomies urinaires	22
Supports	26
Gamme pédiatrique	30
Accessoires Brava®	32
Gamme Sensura®	38
Services Coloplast	
Vidéo d'application	40
Coloplast Professional	42
Service Relations Utilisateurs	43
Développement durable	44
Références	46
Mentions légales et remboursements	48



La technologie BodyFit®

La **technologie BodyFit®** unique à **Sensura® Mio** permet un contact sécurisé jusqu'aux microreliefs de la peau (plis et creux) pour minimiser le risque de fuites et de complications cutanées

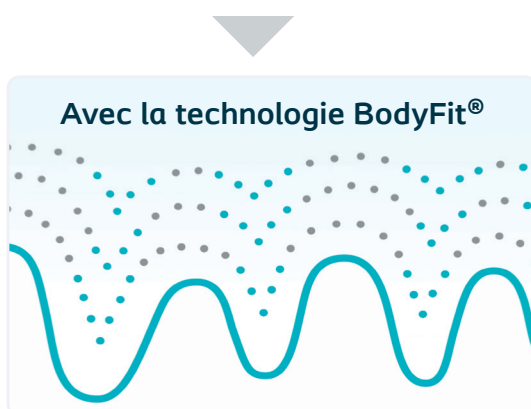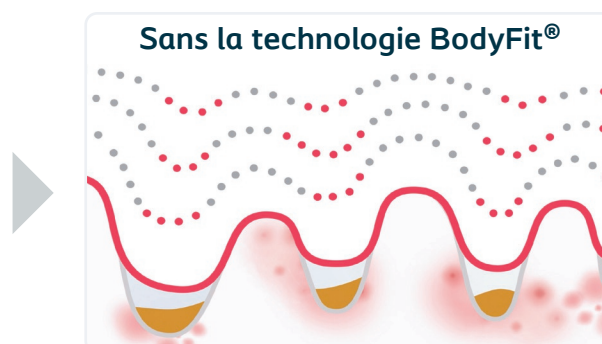

Sensura® Mio est composé d'un mélange spécifique de **3 composants avec 2 couches d'hydrocolloïdes encapsulés**

Selon une étude, 91% des patients estiment que leur appareillage leur permet de prévenir les fuites ¹

POLYMÈRES

Les polymères sont résistants et élastiques pour permettre une bonne adhérence et un contact sécurisé


HYDROCOLLOÏDES

Les hydrocolloïdes absorbent l'humidité et la transforment en gel afin de prévenir la macération


PECTINE

La pectine est présente pour maintenir le pH naturel de la peau

La technologie BodyFit® au sein du protecteur cutané Sensura® Mio permet de suivre les mouvements du corps^{2,3,4} et est conçu pour prévenir les fuites

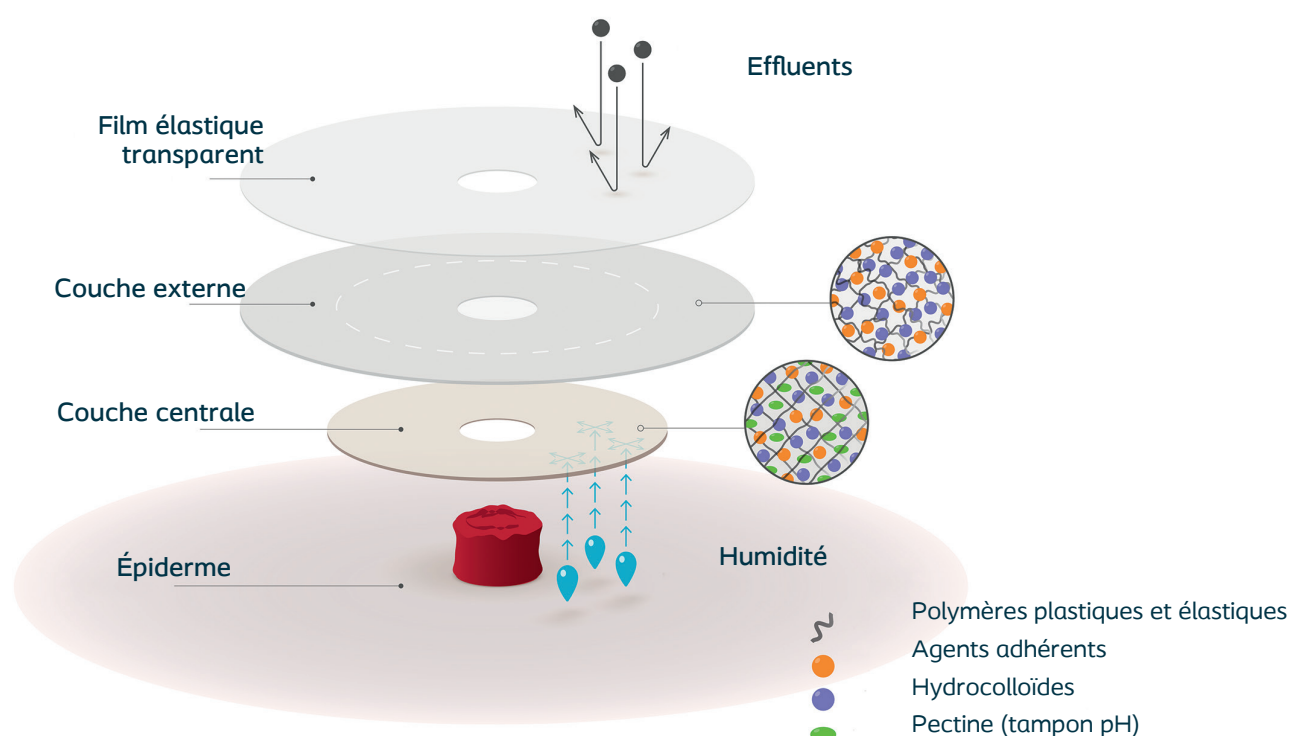

Grâce à la technologie BodyFit®, Sensura® Mio **s'adapte aux différentes morphologies et périodes de la vie**^{2,3,4}

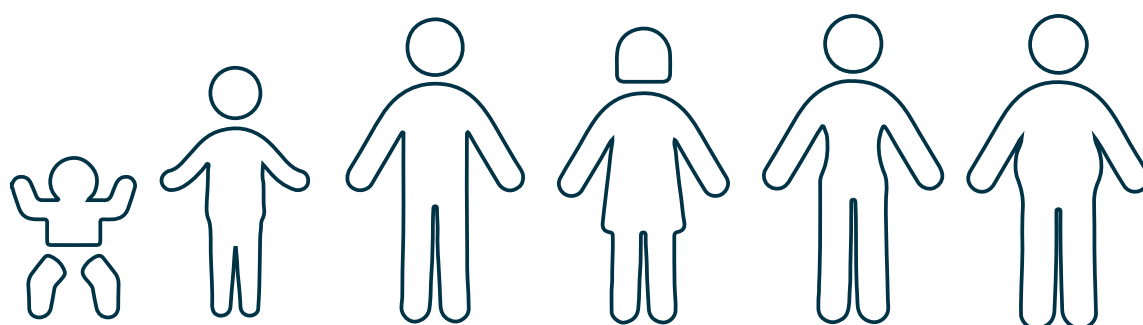

Les nouveautés **Sensura® Mio 1 pièce Convex Fit Souple**

Sécurisé, flexible, simple d'utilisation

Retrouvez tous les bénéfices de Sensura Mio dans un appareillage 1 pièce convexe souple utilisable dès la phase post-opératoire *⁵




La technologie **BodyFit**

- Offre un contact sécurisé avec la zone péristomiale pour protéger la peau
- Minimise le risque de fuite et de complications cutanées



Les flexlines

- Permettent à l'appareillage de s'adapter aux mouvements du corps ⁷

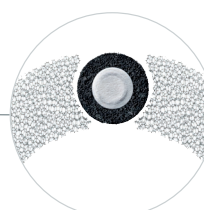

Un filtre 360° unique doté d'un préfiltre **

- Minimise les odeurs ²
- Allonge le délai d'apparition de gonflement de la poche *** ⁶

* sous réserve d'une évaluation individuelle du patient

** Le filtre circulaire des poches Sensura® Mio est breveté.

*** Jusqu'à 82% de temps en plus avant apparition de gonflement de la poche pour l'iléostomie vs double filtre standard Sensura®



Les flexlines sont une technologie unique à la gamme Sensura Mio

Les lignes de flexion de chaque côté de la coque sont présentes pour :

- Apporter de la stabilité autour de la stomie et de la flexibilité en périphérie
- Guider la flexibilité et permettre l'adaptation aux mouvements



Vidéo d'utilisation



Et si vos patients pouvaient choisir chaque jour la couleur de leur poche ?


Sensura Mio 1 pièce Convex Fit Souple, également disponible en noir



Les nouveautés Sensura® Mio Click amélioré

Simple à utiliser, toujours aussi sécurisé⁸

Selon une enquête, plus de **77%** des utilisateurs préfèrent le système de couplage Sensura Mio Click par rapport aux autres disponibles sur le marché *⁹

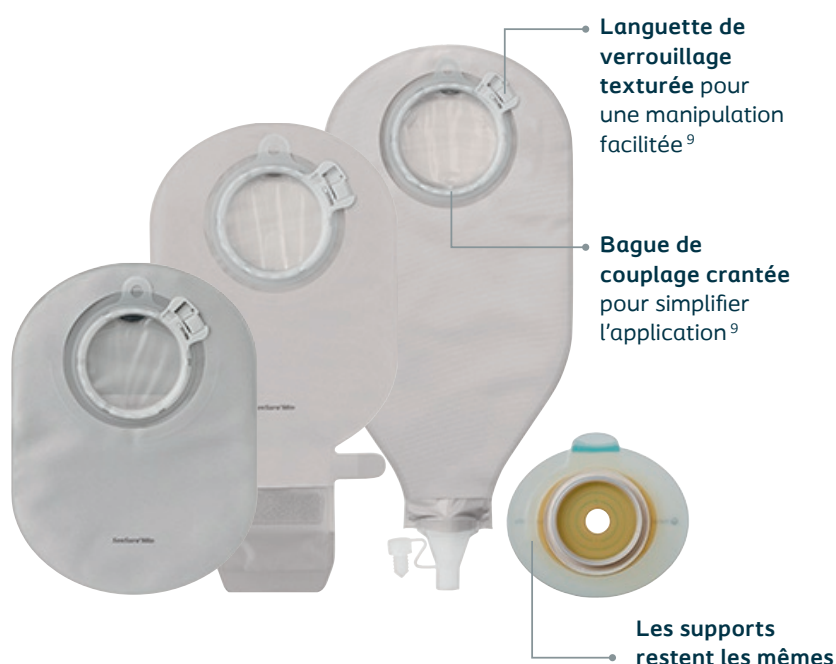

Permet une **application en douceur** de la poche sur le support protecteur cutané en appliquant une **pression minimale** sur l'abdomen⁸



Vidéo utilisation



Application Intuitive

Les poches Sensura Mio Click peuvent être facilement, appliquées, orientées, retirées et repositionnées⁹



Couplage sécurisé et étanche

Sensura Mio Click avec son système couplage amélioré est aussi sécurisé que le design précédent pour prévenir les fuites au niveau du couplage⁸



Click audible

Sensura Mio Click possède une bague de couplage avec une languette de verrouillage pour un couplage sécurisé

Les nouveautés Sensura® Mio en noir

Avoir le choix, c'est offrir au patient chaque jour la possibilité d'alléger ses challenges émotionnels ¹¹



Selon une enquête,
80% des patients trouvent
que Sensura Mio en noir
permet d'avoir un sentiment
de **confiance en soi** ¹²

Les professionnels de santé et les
patients peuvent maintenant choisir
entre deux couleurs :

- le gris : conçu pour rendre la poche invisible sous les vêtements même blancs
- le noir : une couleur intemporelle

**LE
SAVIEZ-
VOUS ?**

La matière textile a été
choisie pour être douce et
apporter confort de port. Elle
est également déperlante pour
éviter les salissures

Une nouvelle couleur. Des milliers de possibilités.



Découvrez le
témoignage de Jean-Luc



La gamme hospitalière **Sensura® Mio Post-op**

Les **bénéfices** de la technologie **BodyFit®**, unique
à Sensura® Mio **dès la phase post-opératoire**



Fenêtre
d'inspection
pour un accès
direct à la stomie



Graduations pour
une indication
du volume
d'effluents



Évacuation large
et connexion
simple au
Collecteur
Express



Emballage
individuel
pour les poches
stériles

Post-opératoire immédiat



Sensura® Mio Post-Op

1 pièce [◇] - Boîte de 5

	Découpe (mm)	Capacité (ml)	Référence	GTIN
Stérile avec fenêtre	10-70 mm	690 ml	186800	5708932069946
	10-100 mm	725 ml	186810	5708932069953
Non stérile avec fenêtre	10-70 mm	690 ml	186900	5708932069960
	10-100 mm	725 ml	186910	5708932069977

Disponible en 4 références :

Poche 1 pièce, diamètre découppable jusqu'à 70 mm ou 100 mm, stérile ou non stérile

Les compléments d'appareillages hospitaliers



Clamp [◇]

Boîte de 10

Référence	GTIN
095000	5708932468732



Collecteur Express*


Grande contenance 2L - Boîte de 10

Référence	GTIN
140100	5708932266741

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49. - [◇] Non Remboursé Sec. Soc.

La gamme hospitalière **Sensura® Mio Haut débit**

La **technologie BodyFit®** unique à Sensura® Mio
dès la reprise du transit

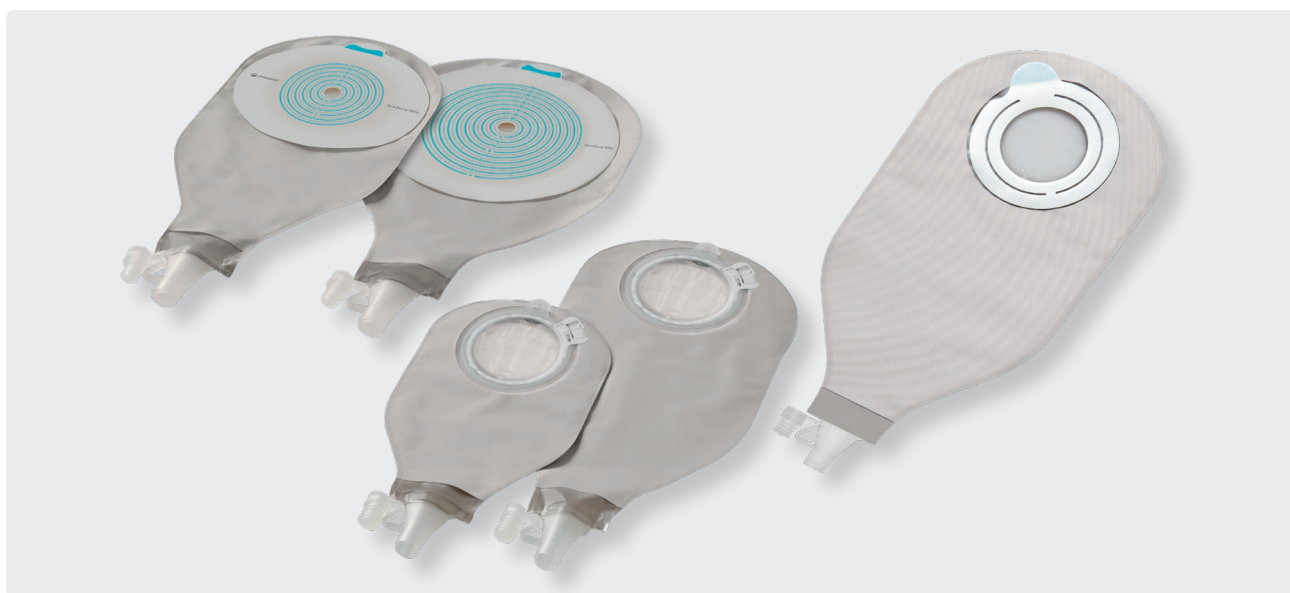

Disponible en 14 références :

Poche 1 pièce diamètre découppable jusqu'à 70 mm ou 100 mm

Poche 2 pièces avec couplage mécanique (Click) ou adhésif (Flex)

Poche 2 pièces mini avec couplage mécanique (Click)



Large
évacuation et
valve anti-reflux



Connexion
simple au
Collecteur
Express



Disponible
également
en version
transparente



Diamètre jusqu'à
100mm pour le
1P et 70mm
pour le 2P

Reprise du transit avec Sensura® Mio

Pour des effluents abondants, liquides ou pâteux



Nouveau
système de
couplage

Sensura® Mio Click Haut Débit

2 pièces* Boîte de 10

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 50	Mini (540 ml)	● Textile gris	186210	5708932044141
● 50	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186010	5708932044080
● 50	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186110	5708932044110
● 60	Mini (540 ml)	● Textile gris	186220	5708932044158
● 60	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186020	5708932044097
● 60	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186120	5708932044127
● 70	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186030	5708932044103
● 70	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186130	5708932044134



Sensura® Mio Flex Haut Débit

2 pièces* Boîte de 30

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 50	Maxi (900 ml)	● Textile gris	186501	5708932044165
● 50	Maxi (900 ml)	○ Transparent	186551	5708932044189
● 70	Maxi (900 ml)	● Textile gris	186511	5708932044172
● 70	Maxi (900 ml)	○ Transparent	186561	5708932044196



Sensura® Mio Haut Débit

1 pièce* Boîte de 30

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-70 mm	Maxi (630 ml)	● Textile gris	186601	5708932065412
10-100 mm	Maxi (725 ml)	○ Transparent	186661	5708932065429



Collecteur Express*

Grande contenance 2L - Boîte de 10

Référence	GTIN
140100	5708932266741



Retrouvez les références des supports associés p. 28-29.

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49.

La gamme hospitalière

Fistula® Système complet [◇], pla

Destiné à l'appareillage des fistules et plaies localisées dans la région abdominale ¹³

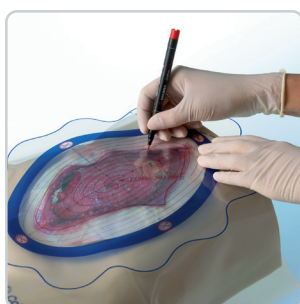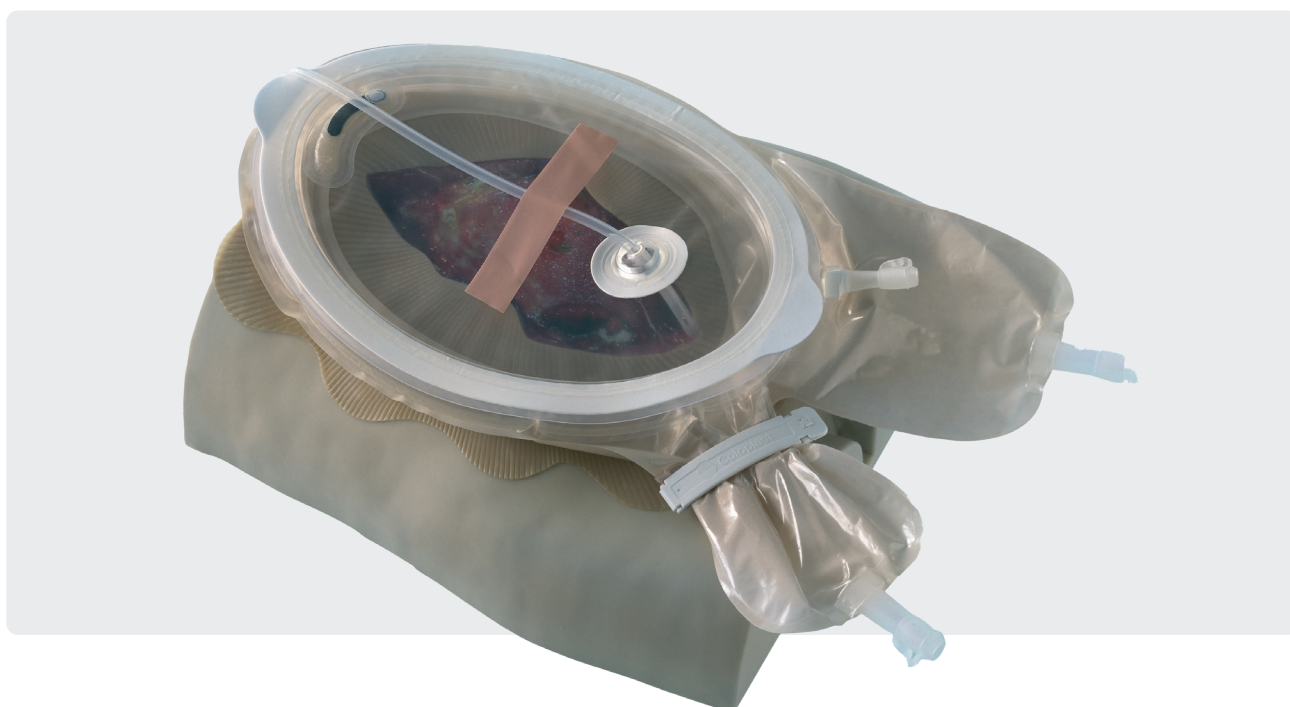


Calque de tracé,
pour dessiner le
contour de la
fistule ou de la
plaie



Support adhésif
à découper en
suivant le tracé
préalablement
dessiné sur le
calque



Anneau
gonflable pour
empêcher les
exsudats de
s'écouler lors de
l'ouverture de la
fenêtre et pour
permettre un
positionnement
optimal de la
fenêtre

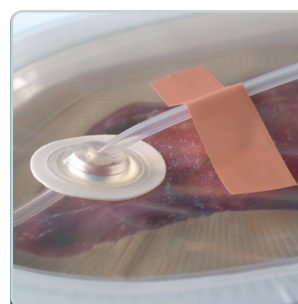

Large fenêtre
d'accès avec
filtre
Possibilité
d'utiliser des
accès drain



Vidéo d'utilisation

Plaie et drainage



Fistula® Système complet ♦

Taille	Référence	GTIN	Boîte de
Mini Largeur 104 mm Hauteur 159 mm	140550	5708932271721	6
Midi Largeur 156 mm Hauteur 228 mm	140650	5708932271745	3
Maxi Largeur 208 mm Hauteur 297 mm	140750	5708932271769	3



Fenêtres flexibles ♦

Boîte de 10

Taille	Référence	GTIN
Mini	140200	5708932270861
Midi	140300	5708932270885
Maxi	140400	5708932270908



Fistula accès drain ♦

Boîte de 12

Taille	Référence	GTIN
CH 18-30	140150	5708932266970



Coloplast drainage poches stériles ♦

Boîte de 10


Découpe	Capacité (ml)	Référence	GTIN
6-38 mm	Mini (100 ml)	022100	5701780400923
6-38 mm	Midi (300 ml)	022150	5701780400930
6-52 mm	Maxi (500 ml)	022200	5701780400947

Sensura® Mio

Les stomies digestives

Qu'est-ce qui rend le filtre Sensura® Mio unique* ?

- 1 Le pré-filtre**
avec ses perforations multiples
conçues pour évacuer les gaz
- 2 Le filtre en mousse**
composé de charbon actif
- 3 La membrane**
conçue pour prévenir les fuites
au travers du pré-filtre

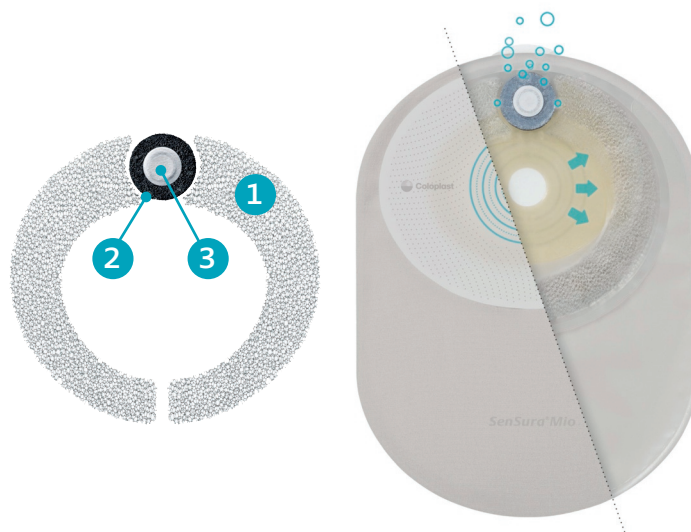

Le filtre Sensura® Mio 360° minimise les odeurs² et permet l'allongement du délai d'apparition de gonflement de la poche : jusqu'à 82% de temps en plus avant apparition de gonflement de la poche pour l'iléostomie, et jusqu'à 74% pour la colostomie **⁶

La gamme Sensura® Mio propose des appareillages adaptés aux **effluents solides, liquides ou pâteux**

Poche fermée



Couche centrale protectrice
Adaptée à un temps de port d'une journée

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents solides***


Poche vidable et Uro



Couche centrale protectrice
Adaptée à un temps de port d'une journée

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents liquides ou pâteux****

Supports plats et convexes



Couche centrale protectrice
Renforcée en agents adhérents***

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents liquides ou pâteux****

Matériel d'irrigation colique



Trousse d'irrigation Sensura® Mio*

Réf.	GTIN
117510	5708932749848

Cône d'irrigation*

Conditionné par 5. Délivré à l'unité

Réf.	GTIN
011100	5701780181723



Manchon d'irrigation Sensura® Mio*

Boîte de 30 manchons

Réf.	GTIN
117500	5708932749817



Mini-poches

Sensura® Mio Mini

1P vidable*

Boîte de 30
110 ml - \approx 10-45




Apparence	Référence	GTIN
● Textile gris	104319	5701780169615
● Textile noir	189929	5701780288316

Sensura® Mio Mini

1P fermée*

Boîte de 30 - 110 ml - \approx 15-45

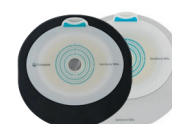

Apparence	Référence	GTIN
● Textile gris	108709	5701780169820
● Textile noir	197149	5701780376747

Alterna® mini-poche*

Boîte de 30 - Ø 20-55



Réf.	GTIN
058760	5701780581691

**Le kit d'irrigation
Sensura® Mio :**
une solution pour
une irrigation
sécurisée



Vidéo
d'utilisation



Sensura® Mio 1 pièce digestif




Poches fermées

Boîte de 30* / Boîte de 10° Hôpital

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
15-45 mm	Mini (110 ml)	● Textile gris	108709	5701780169820
15-45 mm	Mini (110 ml)	● Textile noir	197149	5701780376747
15-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	108719	5701780169837
15-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile noir	197159	5701780376778
15-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	108819	5701780169875
15-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	108811	5708932913386
15-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	197169	5701780376808
25-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	108729	5701780169844
30-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	108739	5701780169851
30-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	108839	5701780169882
30-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	197179	5701780376839
35-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	108749	5701780169868
35-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	108849	5701780169899
35-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	197189	5701780376860
15-55 mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	108919	5701780169912
15-55 mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	108911	5708932913362
40-55 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	108859	5701780169905
40-55 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	197199	5701780376891
10-70 mm	XL (516 ml)	● Textile gris	183710	5701780252447
10-100 mm	XXL (750 ml)	● Textile gris	183730	5701780252607

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Pour offrir davantage de choix à vos patients, vous pouvez proposer les poches Sensura Mio® en noir et en gris, selon leurs préférences

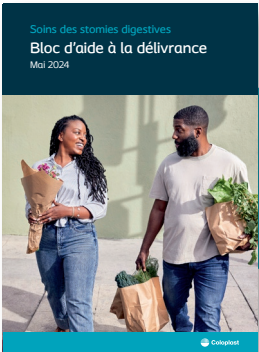

Demandez
cet outil à votre
responsable
régional
Coloplast



Poches Haut Débit

1 pièce Boîte de 30*

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-70 mm	Maxi (630 ml)	● Textile gris	186601	5708932065412
10-100 mm	Maxi (725 ml)	○ Transparent	186661	5708932065429

Sensura[®] Mio 1 pièce digestif



Poches vidables

Boîte de 30* / Boîte de 10° Hôpital

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-45 mm	Mini (110 ml)	● Textile gris	104319	5701780169615
10-45 mm	Mini (110 ml)	● Textile noir	189929	5701780288316
10-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	104419	5701780169622
10-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile noir	189939	5701780288354
10-55 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	104519	5701780169660
10-55 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	104511	5708932913447
10-55 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	189949	5701780288415
10-55 mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	104589	5701780169707
10-55 mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	104581	5708932913423
25-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	104429	5701780169639
30-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	104439	5701780169646
30-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	104529	5701780169677
30-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	189959	5701780288514
35-45 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	104449	5701780169653
35-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	104539	5701780169684
35-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	189969	5701780288620
40-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	104549	5701780169691
40-45 mm	Maxi (550 ml)	● Textile noir	189979	5701780288682
10-70 mm	XL (516 ml)	● Textile gris	183760	5701780252768
10-100 mm	XXL (750 ml)	● Textile gris	183780	5701780252966



Nouveauté

Poches vidables Convexe Souple

Boîte de 10*

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-50 mm	Maxi (490 ml)	● Textile gris	180550	5701780399609
10-50 mm	Maxi (490 ml)	● Textile noir	180270	5701780399722
10-50 mm	Maxi (490 ml)	○ Transparent	180570	5701780399630
15-33 mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	180540	5701780399531
15-33 mm	Midi (340 ml)	● Textile noir	180250	5701780399661
15-33 mm	Maxi (490 ml)	● Textile gris	180560	5701780399562
15-33 mm	Maxi (490 ml)	● Textile noir	180260	5701780399692

Sensura[®] Mio Flex 2 pièces digestif

Système de couplage adhésif souple



Poches fermées

Boîte de 30* / Boîte de 10[°] Hôpital

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 35	Midi (330 ml)	● Textile gris	122019	5701780164405
● 35	Maxi (460 ml)	● Textile gris	122029	5701780164429
● 50	Mini (57 ml)	● Textile gris	122119	5701780164443
● 50	Midi (330 ml)	● Textile gris	122129	5701780164467
● 50	Maxi (460 ml)	● Textile gris	122139	5701780164481
● 50	Maxi (460 ml)	○ Transparent	122169	5701780164504
● 70	Maxi (460 ml)	● Textile gris	122229	5701780164535
● 70	Maxi (460 ml)	○ Transparent	122239	5701780164566
● 70	Maxi (460 ml)	○ Transparent	122231	5708932913003
● 90	XXL (820 ml)	● Textile gris	183860	5701780253222



Poches Haut Débit

Boîte de 30*

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 50	Maxi (900 ml)	● Textile gris	186501	5708932044165
● 50	Maxi (900 ml)	○ Transparent	186551	5708932044189
● 70	Maxi (900 ml)	● Textile gris	186511	5708932044172
● 70	Maxi (900 ml)	○ Transparent	186561	5708932044196



Supports plats

Boîte de 10*

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-33 mm	105510	5708932922722
● 50	10-48 mm	105610	5708932922715
● 50	25-48 mm	105620	5708932556187
● 50	30-48 mm	105630	5708932556200
● 50	35-48 mm	105640	5708932556224
● 50	40-48 mm	105650	5708932556248
● 70	10-68 mm	105710	5708932922708
● 90	10-88 mm	183900	5701780253635



Poches vidables

Boîte de 30* / Boîte de 10[°] Hôpital



Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 35	Midi (290 ml)	● Textile gris	122319	5701780164580
● 35	Midi (290 ml)	● Textile noir	197809	5701780377614
● 35	Maxi (440 ml)	● Textile gris	122329	5701780164603
● 35	Maxi (440 ml)	● Textile noir	197819	5701780377645
● 35	Maxi (440 ml)	○ Transparent	122339	5701780164627
● 50	Mini (70 ml)	● Textile gris	122419	5701780164641
● 50	Mini (70 ml)	● Textile noir	197829	5701780377676
● 50	Midi (290 ml)	● Textile gris	122429	5701780164665
● 50	Midi (290 ml)	● Textile noir	197839	5701780377706
● 50	Maxi (440 ml)	● Textile gris	122439	5701780164689
● 50	Maxi (440 ml)	● Textile noir	197849	5701780377737
● 50	Maxi (440 ml)	● Textile gris	122431	5708932912945
● 50	Maxi (440 ml)	○ Transparent	122449	5701780164702
● 50	Maxi (440 ml)	○ Transparent	122441	5708932912921
● 70	Maxi (440 ml)	● Textile gris	122529	5701780164726
● 70	Maxi (440 ml)	● Textile noir	197859	5701780377768
● 70	Maxi (440 ml)	● Textile gris	122521	5708932912907
● 70	Maxi (440 ml)	○ Transparent	122539	5701780164740
● 70	Maxi (440 ml)	○ Transparent	122531	5708932912884
● 90	XXL (800 ml)	● Textile gris	183880	5701780253475

Supports convexes

Boîte de 5*

Convexe souple			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	180100	5701780320610
● 50	15-30 mm	180120	5701780320634
● 50	15-40 mm	180160	5701780320658
● 70	15-53 mm	180180	5701780320672

Semi-convexe			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	169800	5708932612661
● 35	18-20 mm	169810	5708932612685
● 50	15-30 mm	169830	5708932612708
● 50	21-30 mm	169850	5708932612746
● 50	25-30 mm	169860	5708932612760
● 50	28-30 mm	169870	5708932612784
● 50	15-40 mm	169840	5708932612722
● 50	31-40 mm	169880	5708932612807
● 70	15-53 mm	169950	5708932612821

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49. - ♦ Non Remboursé Sec. Soc.

Sensura[®] Mio Click 2 pièces digestif

Système de couplage mécanique avec click de fermeture



Nouveau système de couplage

Poches fermées

Boîte de 30 *

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 40	Maxi (530 ml)	● Textile gris	114029	5701780170055
● 50	Midi (430 ml)	● Textile gris	114129	5701780170062
● 50	Maxi (530 ml)	● Textile gris	114139	5701780170079
● 50	Maxi (530 ml)	○ Transparent	114149	5701780170086
● 60	Midi (430 ml)	● Textile gris	114219	5701780170093
● 60	Maxi (530 ml)	● Textile gris	114229	5701780170109
● 60	Maxi (530 ml)	○ Transparent	114239	5701780170116
● 70	Maxi (530 ml)	● Textile gris	114259	5701780170123




Nouveau système de couplage

Poches Haut Débit

Boîte de 10 *

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 50	Mini (540 ml)	● Textile gris	186210	5708932044141
● 50	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186010	5708932044080
● 50	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186110	5708932044110
● 60	Mini (540 ml)	● Textile gris	186220	5708932044158
● 60	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186020	5708932044097
● 60	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186120	5708932044127
● 70	Maxi (1040 ml)	● Textile gris	186030	5708932044103
● 70	Maxi (1040 ml)	○ Transparent	186130	5708932044134

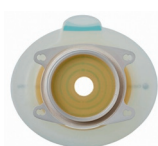

Supports plats

Boîte de 10 *

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-35 mm	105020	5708932922807
● 40	25-35 mm	105040	5708932922791
● 50	10-45 mm	105120	5708932922784
● 50	30-45 mm	105130	5708932922777
● 50	35-45 mm	105150	5708932922760
● 60	10-55 mm	105220	5708932922753
● 60	40-55 mm	105230	5708932922746
● 70	10-65 mm	105310	5708932922739



Nouveau système de couplage

Poches vidables

Boîte de 30 * / Boîte de 10 ° Hôpital

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 40	Midi (390 ml)	● Textile gris	114319	5701780170130
● 40	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114329	5701780170147
● 40	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114339	5701780170154
● 50	Midi (390 ml)	● Textile gris	114429	5701780164245
● 50	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114439	5701780164269
● 50	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114431	5708932913249
● 50	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114449	5701780164283
● 50	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114441	5708932913225
● 60	Midi (390 ml)	● Textile gris	114519	5701780164306
● 60	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114529	5701780164320
● 60	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114521	5708932913201
● 60	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114539	5701780164344
● 60	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114531	5708932913188
● 70	Maxi (510 ml)	● Textile gris	114569	5701780164368
● 70	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114579	5701780164382
● 70	Maxi (510 ml)	○ Transparent	114571	5708932913140

Supports convexes

Boîte de 5 *

Semi-convexe

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165600	5708932612302
● 40	18-20 mm	165610	5708932612326
● 50	15-30 mm	165650	5708932612340
● 50	21-30 mm	165660	5708932612364
● 50	25-30 mm	165670	5708932612388
● 50	28-30 mm	165680	5708932612401
● 60	15-40 mm	165690	5708932612425
● 60	31-40 mm	165700	5708932612449
● 70	15-53 mm	165750	5708932612463

Convexe profond

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165800	5708932612487
● 50	15-30 mm	165830	5708932612524
● 50	21-30 mm	165840	5708932612548
● 50	25-30 mm	165850	5708932612562
● 50	28-30 mm	165860	5708932612586
● 60	15-40 mm	165870	5708932612609
● 70	15-53 mm	165950	5708932612647


Sensura® Mio

Les stomies urinaires


Pouvoir surveiller sa stomie et son débit urinaire



- **Poches avec des valves anti-reflux basses** pour faciliter le positionnement des sondes

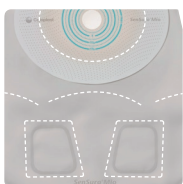

- Avec **un système multi-compartiments**, la poche **Sensura® Mio** répartit de manière homogène les urines sur la hauteur de la poche

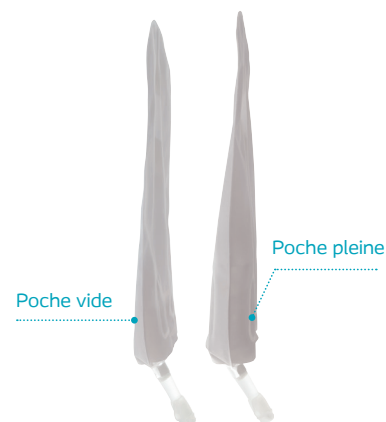

Un robinet pour vider la poche facilement



- Un robinet de vidange souple, pratique et repliable pour plus de discrétion¹³
- 100 % des patients Sensura® Mio urostomisés trouvent que le robinet de vidange est facile à manipuler¹



Flexibilité

Le support protecteur cutané souple est conçu pour prévenir les fuites car il accompagne les mouvements du corps, que le patient soit assis, penché ou en extension^{2,3,4}



Sécurité

Des systèmes 1 pièce ou 2 pièces (couplage click ou flex indolore) offrant un sentiment de sécurité¹



Confort

Le robinet facile à manipuler, souple et repliable

Sensura[®] Mio 1 pièce uro

Poches vidangeables (uro)

Boîte de 30 * / Boîte de 10 ° Hôpital



Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-45mm	Midi (340 ml)	● Textile gris	105810	5708932923378
10-45mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	105820	5708932923361
10-45mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	105860	5708932923323
10-45mm	Maxi (550 ml)	○ Transparent	105861	5708932913409
20-45mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	105830	5708932923354
25-45mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	105840	5708932923347
30-45mm	Maxi (550 ml)	● Textile gris	105850	5708932923330

Compléments de gamme



Coloplast poche à urine*

Boîte de 30

	Référence	GTIN
2 L tub 120 cm ajustable	213650	5708932512022



Conveen[®] Porte-poche de sol[◇]

Vendu à l'unité

Réf.	GTIN
380431	5708932263313



Conveen Poche de jambe*

Boîte de 30

	Référence	GTIN
0,75 L tub 50 cm ajustable	051670	5708932498265
0,50 L tub 50 cm ajustable	051610	5708932498241



Porte-poche de lit[◇]

Vendu à l'unité

Réf.	GTIN
050700	5701780009652

Largeur : 3,5 cm



Largeur: 2,5 cm



Conveen Attaches de jambe*

Boîte de 10 paires

Référence	GTIN
050501	5708932135184



Connecteur Y[◇]

Boîte de 10

Référence	GTIN
PB1204	3600040975176



Conveen Filets*

Boîte de 2 filets

	Circonf.	Référence	GTIN
● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
● Large	55-85 cm	783695	5708932507202



Coloplast Connecteurs Uro[◇]

Boîte de 10

Référence	GTIN
098000	5708932219471

Sensura® Mio Flex 2 pièces uro

Système de couplage adhésif souple

Poches vidangeables (uro)

Boîte de 30* / Boîte de 10° Hôpital



Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 35	Maxi (410 ml)	● Textile gris	122910	5708932922852
● 35	Maxi (410 ml)	○ Transparent	122920	5708932922845
● 50	Midi (300 ml)	● Textile gris	122960	5708932922838
● 50	Maxi (410 ml)	● Textile gris	122970	5708932922821
● 50	Maxi (410 ml)	○ Transparent	122980	5708932922814
● 50	Maxi (410 ml)	○ Transparent	122981	5708932912822



Supports plats

Boîte de 10*

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-33 mm	105510	5708932922722
● 50	10-48 mm	105610	5708932922715
● 50	25-48 mm	105620	5708932556187
● 50	30-48 mm	105630	5708932556200
● 50	35-48 mm	105640	5708932556224
● 50	40-48 mm	105650	5708932556248



Supports convexes

Boîte de 5*

Convexe souple			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	180100	5701780320610
● 50	15-30 mm	180120	5701780320634
● 50	15-40 mm	180160	5701780320658



Semi-convexe			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	169800	5708932612661
● 35	18-20 mm	169810	5708932612685
● 50	15-30 mm	169830	5708932612708
● 50	21-30 mm	169850	5708932612746
● 50	25-30 mm	169860	5708932612760
● 50	28-30 mm	169870	5708932612784
● 50	15-40 mm	169840	5708932612722
● 50	31-40 mm	169880	5708932612807

Sensura® Mio Click 2 pièces uro

Système de couplage mécanique avec click de fermeture

Poches vidangeables (uro)


Boîte de 30 * / Boîte de 10 * Hôpital



Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 40	Maxi (500 ml)	● Textile gris	114910	5708932922906
● 40	Maxi (500 ml)	○ Transparent	114920	5708932922890
● 50	Midi (400 ml)	● Textile gris	114960	5708932922883
● 50	Maxi (500 ml)	● Textile gris	114970	5708932922876
● 50	Maxi (500 ml)	○ Transparent	114980	5708932922869
● 50	Maxi (500 ml)	○ Transparent	114981	5708932913089
● 60	Maxi (500 ml)	● Textile gris	114990	5708932678315
● 60	Maxi (500 ml)	○ Transparent	115000	5708932678339

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec Sensura® Mio Click, vous pouvez changer l'orientation de votre poche en fonction du moment de la journée (journée, sieste, nuit...)

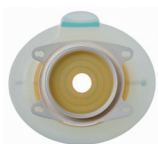

Supports plats

Boîte de 10 *

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-35 mm	105020	5708932922807
● 40	25-35 mm	105040	5708932922791
● 50	10-45 mm	105120	5708932922784
● 50	30-45 mm	105130	5708932922777
● 50	35-45 mm	105150	5708932922760
● 60	10-55 mm	105220	5708932922753
● 60	40-55 mm	105230	5708932922746



Supports convexes

Boîte de 5 *

Semi-convexe			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165600	5708932612302
● 40	18-20 mm	165610	5708932612326
● 50	15-30 mm	165650	5708932612340
● 50	21-30 mm	165660	5708932612364
● 50	25-30 mm	165670	5708932612388
● 50	28-30 mm	165680	5708932612401
● 60	15-40 mm	165690	5708932612425
● 60	31-40 mm	165700	5708932612449



Convexe profond			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165800	5708932612487
● 50	15-30 mm	165830	5708932612524
● 50	21-30 mm	165840	5708932612548
● 50	25-30 mm	165850	5708932612562
● 50	28-30 mm	165860	5708932612586
● 60	15-40 mm	165870	5708932612609



Sensura® Mio

Les supports convexes

Adaptabilité et flexibilité :

Sensura® Mio Convex Fit possède les deux




Technologie BodyFit®

Technologie d'adhésif élastique exclusive aux supports protecteurs cutanés Sensura Mio

- Permet une bonne adaptation aux zones péristomiales planes, creuses et bombées
- S'adapte aux microreliefs de la peau (plis et creux) pour prévenir l'infiltration des effluents entre le support protecteur cutané et la peau


Flexlines

Lignes de flexion intégrées permettant de s'adapter aux mouvements du corps⁷

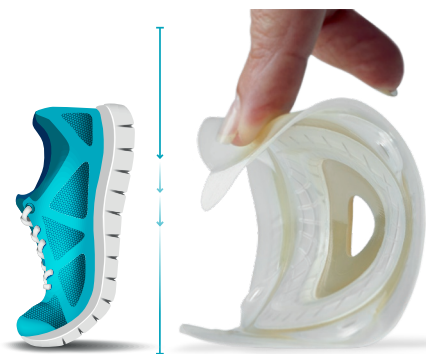


Sensura® Mio Convex Fit offre **trois niveaux de convexité** pour répondre à davantage de besoins cliniques

Convexe souple

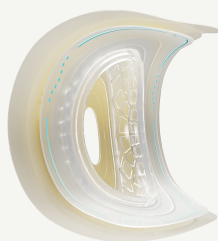

- Pour aplanir la zone péristomiale
- Convexité légère et souple
- **Disponible en couplage Flex**

Semi-convexe

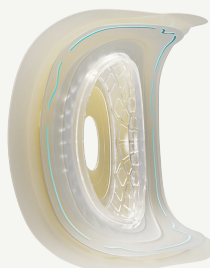

- Pour une protrusion de la stomie
- Convexité légère
- **Disponible en couplage Click et Flex**


Convexe profond



- Pour une protrusion de la stomie
- Convexité importante
- **Disponible en couplage Click**

Naviguez dans l'univers de la convexité avec Sensura® Mio Convex Fit

Guide d'utilisation de la convexité

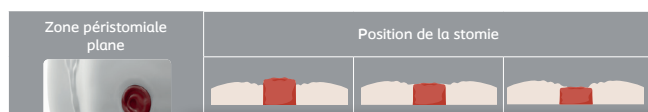

Si la région péristomiale présente des fuites, il est recommandé de passer sur un niveau de convexité supérieur. Pour mieux repérer les niveaux de convexité :

Convexe souple - Semi-convexe - Convexe profond

Guide d'utilisation de la convexité

Zone péristomiale creuse		Position de la stomie		
Irrégularités de la zone péristomiale	Pas ou superficielles	Au-dessus du niveau de la peau	Au niveau de la surface de la peau	En dessous du niveau de la peau
	Profondes	Convexe souple ou Semi-convexe	Semi-convexe	Semi-convexe ou Convexe profond

Si la région péristomiale présente déjà des fuites, il est recommandé de passer sur un niveau de convexité supérieur.

Pour mieux repérer les niveaux de convexité :

Convexe souple - Semi-convexe - Convexe profond

Coloplast Coloplast SAS, Société par actions simplifiée - Siège social : 10 rue de la République - 94200 Fontenay-sous-Bois - France
Capital social : 2 500 000 euros - RCS Nanterre 121 284 300 - SIREN 542 284 300 - COPLA SAS (en France) - COPLA SAS (en France) - COPLA SAS (en France)
www.coloplast.com - Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 2002 Hørsholm. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - 1961 - 000001 - Mai 2024



Demandez cet outil à votre responsable régional Coloplast




Sensura[®] Mio

Les couplages

Couplage adhésif Flex

Le couplage Flex maintient la poche couplée au support Sensura Mio et permet de se sentir en sécurité¹

Collerette flottante
Pour une application en douceur sans pression sur la zone péristomiale

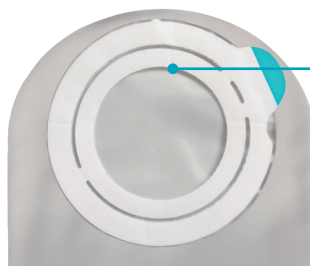

Canal de sécurité
Conçu pour aider à prévenir les fuites

Fin et souple

Permet de suivre les mouvements du corps^{2,3}

Facile à manipuler¹

Pour faciliter la pose, plier la mousse adhésive en deux

Conçu pour prévenir les fuites

La mousse adhésive en polyéthylène a été développée pour prévenir les fuites



Supports plats

Boîte de 10*

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-33 mm	105510	5708932922722
● 50	10-48 mm	105610	5708932922715
● 50	25-48 mm	105620	5708932556187
● 50	30-48 mm	105630	5708932556200
● 50	35-48 mm	105640	5708932556224
● 50	40-48 mm	105650	5708932556248
● 70	10-68 mm	105710	5708932922708
● 90	10-88 mm	183900	5701780253635



Supports convexes

Boîte de 5*

Convexe souple			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	180100	5701780320610
● 50	15-30 mm	180120	5701780320634
● 50	15-40 mm	180160	5701780320658
● 70	15-53 mm	180180	5701780320672


Semi-convexe			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 35	10-20 mm	169800	5708932612661
● 35	18-20 mm	169810	5708932612685
● 50	15-30 mm	169830	5708932612708
● 50	21-30 mm	169850	5708932612746
● 50	25-30 mm	169860	5708932612760
● 50	28-30 mm	169870	5708932612784
● 50	15-40 mm	169840	5708932612722
● 50	31-40 mm	169880	5708932612807
● 70	15-53 mm	169950	5708932612821

Couplage mécanique Click

Le couplage Click est conçu pour prévenir les fuites au niveau du système de couplage³

Baguette de couplage

Selon une étude, le couplage est indolore pour 97% des patients¹

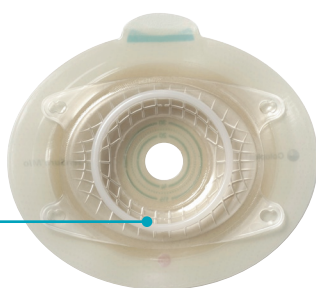

Nouveau click déjà disponible sur les poches fermées, vidables et Haut Débit

Facile à manipuler


Selon une étude, 97% des patients trouvent que l'appareillage est facile à coupler¹

Couplage sécurisé

Selon une étude, 96% des patients se sentent en sécurité avec Sensura Mio 2 pièces Click¹

Conçu pour prévenir les fuites

Prévention des fuites au niveau du système de couplage³

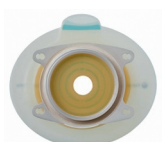

Supports plats

Boîte de 10*

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-35 mm	105020	5708932922807
● 40	25-35 mm	105040	5708932922791
● 50	10-45 mm	105120	5708932922784
● 50	30-45 mm	105130	5708932922777
● 50	35-45 mm	105150	5708932922760
● 60	10-55 mm	105220	5708932922753
● 60	40-55 mm	105230	5708932922746
● 70	10-65 mm	105310	5708932922739



Supports convexes

Boîte de 5*

Semi-convexe			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165600	5708932612302
● 40	18-20 mm	165610	5708932612326
● 50	15-30 mm	165650	5708932612340
● 50	21-30 mm	165660	5708932612364
● 50	25-30 mm	165670	5708932612388
● 50	28-30 mm	165680	5708932612401
● 60	15-40 mm	165690	5708932612425
● 60	31-40 mm	165700	5708932612449
● 70	15-53 mm	165750	5708932612463

Convexe profond			
Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 40	10-20 mm	165800	5708932612487
● 50	15-30 mm	165830	5708932612524
● 50	21-30 mm	165840	5708932612548
● 50	25-30 mm	165850	5708932612562
● 50	28-30 mm	165860	5708932612586
● 60	15-40 mm	165870	5708932612609
● 70	15-53 mm	165950	5708932612647

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49.

Sensura® Mio

Baby et Kids

La gamme pédiatrique Baby

Pour les nouveaux-nés stomisés entre 30 semaines de grossesse et 6 mois

Fenêtre de réinstillation

- Fenêtre avec languette adhésive, amovible et repositionnable afin de faciliter l'accès à la stomie lors de réinstillation¹⁴
- Conçue pour réduire le temps de soin des stomies des nouveaux-nés et faciliter la réinstillation¹⁴

Bouchon en matière douce

- Conçu pour être doux pour la peau des bébés¹⁴
- La manipulation du système de vidange est facile¹⁴




Sensura® Mio Baby*

2 pièces

Boîte de 30

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 40	160 ml	○ Transparent	187001	5708932702249

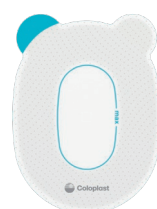

Sensura® Mio Baby*

Supports 2 pièces

Boîte de 5

Découpe	Référence	GTIN
0-40mm	187050	5708932702225



Brava® Baby Huile de retrait d'adhésif[◇]

Boîte de 30

Référence	GTIN
120140	5708932130967

La gamme pédiatrique Kids

Pour les enfants stomisés de 6 mois à 4 ans

Stomies urinaires



Sensura® Mio Kids*

1 pièce vidangeable

Boîte de 30

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-35 mm	190 ml	● Textile gris	187131	5708932693820
10-35 mm	190 ml	○ Transparent	187121	5708932693806

Alterna Uro Pédiatrie

1 pièce vidangeable*

Boîte de 30

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
10-35 mm	185 ml	○ Transparent	080090	5701780848770

Stomies digestives



Sensura® Mio Kids*

1 pièce vidable

Boîte de 30

Découpe	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
0-35 mm	Midi (175 ml)	● Textile gris	187101	5708932109833
0-35 mm	Midi (175 ml)	○ Transparent	187111	5708932109840

Alterna® Pédiatrie*

2 pièces vidables

Boîte de 30

	Découpe	Anneau (mm)	Référence	GTIN
Poche transparente (105 ml)	10-35 mm	● 40	017829	5701780169059
Support standard (boîte de 10)	10-35 mm	● 40	131490	5701780927475



Sensura® Mio Kids Flex*

2 pièces vidables

Boîte de 30

Anneau (mm)	Capacité (ml)	Apparence	Référence	GTIN
● 27	Mini (85 ml)	● Textile gris	187201	5708932109857
● 27	Midi (195 ml)	● Textile gris	187221	5708932109710
● 27	Mini (85 ml)	○ Transparent	187211	5708932109864
● 27	Midi (195 ml)	○ Transparent	187231	5708932109727
● 35	Midi (195 ml)	● Textile gris	187241	5708932109734
● 35	Midi (195 ml)	○ Transparent	187251	5708932109741

Easiflex® Pédiatrie*

2 pièces vidables

Boîte de 30

	Anneau (mm)	Référence	GTIN
Poche opaque (105 ml)	● 17	146910	5708932185752
Support standard (boîte de 10)	● 17	143070	5708932183710
Poche opaque (150 ml)	● 27	146920	5708932185776
Support standard (boîte de 10)	● 27	143080	5708932183734



Sensura® Mio Kids Flex*

Supports 2 pièces

Boîte de 10

Anneau (mm)	Découpe	Référence	GTIN
● 27	0-27 mm	187351	5708932693509
● 35	0-35 mm	187471	5708932693530

Le support de Sensura® Mio Kids est spécialement conçu en forme d'étoile pour :

- S'adapter aux ventres ronds des enfants¹⁵
- Faciliter le positionnement sur l'abdomen (ombilic, aine)¹⁵
- Permettre aux enfants de bouger librement¹⁵

Comment prévenir les fuites ?

Anneaux protecteurs Brava®

Destinés à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et le support protecteur cutané et au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale¹³



- **Imperméabilité** : pour protéger la peau des effluents¹³
- **Léger gonflement** : afin de protéger la peau autour de la stomie¹³
- **Absorption de l'humidité**¹⁶ : pour éviter la macération de la peau
- **Résistance à l'érosion**¹⁷

Anneaux protecteurs convexes Brava®

Permettent de créer une convexité pour les personnes dont la stomie nécessite une protrusion



- **Flexibilité** : peuvent être modelés pour offrir une convexité personnalisée¹³
- **S'adaptent à toutes les tailles et formes de stomie***
- **Maintien de la convexité** après avoir étiré l'anneau¹⁸
- **Résistance à l'érosion**¹⁷

13 tailles et épaisseurs pour les différentes formes de stomie



Anneaux protecteurs Brava®*

Conçus pour prévenir les fuites et les irritations cutanées qui en découlent**¹³

Boîte de 10

Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
	18 mm	64 mm	120381	5701780173940
	34 mm	64 mm	120391	5701780173957
	18 mm	76 mm	120321	5708932726559
4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
	18 mm	64 mm	120481	5708932725286
	34 mm	64 mm	120491	5708932725323



Anneaux protecteurs convexes Brava®*

Conçus pour les stomies planes et rétractées

Boîte de 10 - Épaisseur 8 mm

Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
20 mm	60 mm	120901	5708932740777
25 mm	65 mm	120911	5708932740807
30 mm	70 mm	120921	5708932740838
35 mm	75 mm	120931	5708932740869
40 mm	80 mm	120941	5708932740890
45 mm	85 mm	120951	5708932740920



Anneaux modelables Brava®*

Créent un joint d'étanchéité pour prévenir les fuites** et simple à manipuler et modeler

Boîte de 10

Épaisseur	Ø	Réf.	GTIN
2,0 mm	18 mm	120307	5701780173896
4,2 mm	18 mm	120427	5701780173896

Choisissez la taille qui convient le mieux à vos patient avec l'éventail des anneaux Brava®



Demandez cet outil à votre responsable régional Coloplast

Les compléments



Pâte en tube Brava® sans alcool et pâte en barrette Brava®

Une protection contre les effluents¹³

	Réf.	GTIN
Tube 60 g* Une unité	120501	5708932740579
Tube 25 g[◇] Par 12	120510	5708932557535
Barrette 6 g* Par 10	026555	5708932502702

96% des utilisateurs sont satisfaits du respect de la peau péristomiale²⁰

Coloplast® Pâte en tube*

	Réf.	GTIN
Tube 60 g Conditionnée par 12 Délivrable à l'unité	026501	5708932453004

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49. ◇ Non Remboursé Sec. Soc.

** En créant un joint entre la peau péristomiale saine et le protecteur cutané (voir notice d'instruction).

Comment protéger la peau ?

Spray de retrait Brava®

Conçu pour minimiser les traumatismes mécaniques



- Pour un retrait en douceur
- Ne pique pas**
- Diminue le gaspillage avec la technologie “bag on valve” car le spray peut être entièrement vidé^{21,22}

Spray* et lingette[◇] pour retrait d'adhésif Brava®

- Retrait rapide
- Séchage en quelques secondes, ne compromet pas l'adhérence de l'appareillage appliqué par la suite¹³



	Réf.	GTIN
Spray 50 ml Une unité	120101	5708932740463
Lingettes Boîte de 30	120115	5708932503693

Poudre Brava®*

Une poudre pour prendre soin de la peau péristomiale



Conditionnée par 16 - Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
25 g	019075	5708932721400

- ✓ Utilisation sur le pourtour de la stomie
- ✓ Conçue pour maintenir la peau sèche en absorbant l'humidité de la peau saine

Spray et lingettes de protection cutanée Brava®

Un film protecteur qui ne pique pas*** et une solution destinée à protéger la peau saine des effets néfastes des effluents et des adhésifs¹³



	Réf.	GTIN
Spray 50 ml Une unité	120201	5708932740494
Lingettes Boîte de 30	120215	5708932503716

- ✓ Film protecteur contre les effluents¹³
- ✓ N'altère pas l'adhésivité du support appliqué par la suite¹³

Crème[◇] et plaque* de protection cutanée Brava®

Solutions conçues pour prendre soin de la peau péristomiale



	Réf.	GTIN
Tube 60 ml Une unité	120001	5708932740555

- ✓ Hydratante**



	Taille.	Réf.	GTIN
Plaque Boîte de 5	10x10 cm	032106	5708932502764
	15x15 cm	032155	5708932502788

- ✓ Protège la peau saine des effluents de stomie et des sécrétions corporelles¹³

Flacon et dosettes de déo-lubrifiant Brava®

Une solution conçue pour désodoriser¹³



	Réf.	GTIN
Flacon 240 ml Une unité	120611	5708932740524
Dosette 7,5 ml Boîte de 20	120600	5708932523462

- ✓ Action lubrifiante pour permettre aux effluents de glisser au fond de la poche : pour éviter la stagnation au niveau de la stomie et pour permettre de vider plus facilement la poche¹³

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49. - ◇ Non Remboursé Séc. Soc.

** Contient un émulsifiant connu pour ses propriétés hydratantes des couches superficielles de l'épiderme

*** Sans alcool

Comment faciliter le quotidien ?


Brava® Support Plus

Pour éviter le décollement externe de l'appareillage chez les personnes présentant une morphologie péristomiale irrégulière ¹³

- Élastique
- Respectueux de la peau (produit à base d'hydrocolloïde qui n'est pas fabriqué avec du latex) ²³
- Couleur neutre




4 formes pour s'adapter sur tout type de supports Coloplast et aux morphologies péristomiales irrégulières

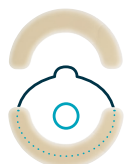

Brava® Support Plus *Standard*

Pour les supports ronds

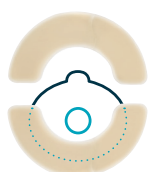


Brava® Support Plus *XL*

Offre une zone d'adhérence plus large que la forme standard



Brava® Support Plus *Forme Droite*

Pour les supports carrés

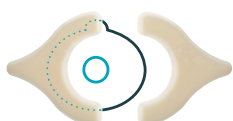

Brava® Support Plus *Forme Large*

Un soutien supplémentaire en forme de Y pour les zones bombées irrégulières

Les renforts périphériques suivent les mouvements du corps, ainsi ils doivent être posés sans être étirés

Brava® Support Plus*

Un renfort périphérique pour les patients stomisés présentant une morphologie péristomiale irrégulière



Boîte de 20

Forme	Réf.	GTIN
Standard	120701	5708932598583
XL	120760	5708932676144
Droite	120740	5708932609876
Large	120720	5708932609852

- ✓ Prévention du décollement prématuré de l'appareillage¹³
- ✓ S'adapte aux mouvements du corps

Les compléments

Ceinture Mio Brava®*

Une ceinture spécifiquement conçue pour un appareillage avec les poches Sensura® Mio



Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

Taille	Réf.	GTIN
Standard 100 cm	004230	5708932135252
XL 155 cm	004240	5708932135245

- ✓ Couleur neutre pour plus de discrétion
- ✓ 4 encoches pour une sécurité supplémentaire
- ✓ 2 tailles : standard (100 cm) et XL (155 cm)

Ceinture Brava®*

Le maintien renforcé pour un appareillage avec les poches Sensura®



Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

Réf.	GTIN
004215	5701780181877



Lingettes pour toilette intime Brava®

	Réf.	GTIN
Paquet de 15 lingettes	120801	5708932135146



Sachets service Coloplast®

	Réf.	GTIN
Boîte de 90	098060	5708932243322

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes aux p. 48-49. ♦ Non Remboursé Séc. Soc.

La gamme Sensura®

Les poches fermées Sensura®



Sensura®
1 pièce fermée*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
25	Midi	154529	5701780165785
	Maxi	154829	5701780166225
30	Midi	154539	5701780165891
	Maxi	154839	5701780166270
35	Midi	154549	5701780165976
	Maxi	154849	5701780166294
40	Midi	154559	5701780165990
45	Midi	154569	5701780166010
50	Midi	154579	5701780166034
≥ 10/66	Mini	154209	5701780165648
	Midi	154509	5701780165761
≥ 10/76	Maxi	154809	5701780166201
Transparent			
25	Midi	154429	5701780165709
	Maxi	154729	5701780166096
30	Midi	154439	5701780165723
	Maxi	154739	5701780166140
35	Midi	154449	5701780165747
	Maxi	154749	5701780166164
≥ 10/66	Midi	154419	5701780165662
≥ 10/76	Maxi	154709	5701780166065



Sensura®
1 pièce fermée*
Avec fenêtre
Visio Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
25	Midi	150219	5701780165488
30	Midi	150229	5701780165501
	Maxi	150319	5701780165563
35	Midi	150239	5701780165525
≥ 10/66	Midi	150209	5701780165464
≥ 10/76	Maxi	150309	5701780165556



Sensura® Click
2 pièces fermée*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
40	Midi	101549	5701780169233
	Maxi	101649	5701780169264
50	Mini	101529	5701780169226
	Midi	101559	5701780169240
60	Maxi	101659	5701780169271
	Midi	101569	5701780169257
70	Maxi	101669	5701780169288
	Maxi	101679	5701780169295
Transparent			
40	Maxi	101849	5701780169301
50	Maxi	101859	5701780169318
60	Maxi	101869	5701780169325
70	Maxi	101879	5701780169332



Sensura® Flex
2 pièces fermée*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
35	Midi	109049	5701780169943
	Maxi	109149	5701780169981
50	Mini	108959	5701780169929
	Midi	109059	5701780169950
70	Maxi	109159	5701780169998
	Maxi	109189	5701780170017
90	XL	109209	5701780170031
	85.L	109919	5701780170048
Transparent			
35	Maxi	109119	5701780169967
50	Midi	109029	5701780169936
	Maxi	109129	5701780169974
70	Maxi	109179	5701780170000
	XL	109199	5701780170024

Les poches vidables Sensura®



Sensura® 1 pièce Vidable*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
25	Midi	155529	5701780166379
	Maxi	155829	5701780166690
30	Midi	155539	5701780166409
	Maxi	155839	5701780166737
35	Midi	155549	5701780166447
	Maxi	155849	5701780166751
≥ 10/66	Mini	155209	5701780166317
	Midi	155509	5701780166355
≥ 10/76	Maxi	155809	5701780166669
Transparent			
25	Maxi	155729	5701780166546
30	Maxi	155739	5701780166560
35	Maxi	155749	5701780166645
≥ 10/66	Midi	155419	5701780166331
≥ 10/76	Maxi	155709	5701780166515



Sensura® 1 pièce Vidable*
Avec fenêtre Visio Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
≥ 10/66	Midi	152519	5701780165587
≥ 10/76	Maxi	152819	5701780165600



Sensura® Click 2 pièces Vidable*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
40	Mini	103519	5701780169455
	Midi	103549	5701780169479
50	Maxi	103649	5701780169509
	Mini	103529	5701780169462
60	Midi	103559	5701780169486
	Maxi	103659	5701780169516
70	Midi	103569	5701780169493
	Maxi	103669	5701780169523
70	Maxi	103679	5701780169530
Transparent			
40	Maxi	103849	5701780169554
50	Maxi	103859	5701780169561
60	Midi	103769	5701780169547
	Maxi	103869	5701780169578
70	Maxi	103879	5701780169585



Sensura® Flex 2 pièces Vidable*
Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
Opaque			
35	Midi	103149	5701780169356
	Maxi	103249	5701780169394
50	Midi	103159	5701780169363
	Maxi	103259	5701780169400
70	Maxi	103289	5701780169424
	XL	103309	5701780169448
90	85.L	103919	5701780169608
Transparent			
35	Maxi	103219	5701780169370
50	Midi	103129	5701780169349
	Maxi	103229	5701780169387
70	Maxi	103279	5701780169417
	XL	103299	5701780169431
90	85.L	103909	5701780169592

Les poches uro Sensura®

Sensura® 1 pièce Uro*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Opaque			
≤ 10/66	Midi	118010	5708932395175
≤ 10/76	Maxi	118020	5708932395205
Transparent			
≤ 10/66	Midi	118030	5708932395236
≤ 10/76	Maxi	118040	5708932395267



Sensura® Click 2 pièces Uro*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Opaque			
40	Midi	118410	5708932398169
40	Maxi	118440	5708932398220
50	Midi	118420	5708932398190
50	Maxi	118450	5708932398251
60	Maxi	118460	5708932398282
Transparent			
40	Midi	118510	5708932398312
40	Maxi	118540	5708932398374
50	Midi	118520	5708932398343
50	Maxi	118550	5708932398404
60	Maxi	118560	5708932398435



Sensura® Flex 2 pièces Uro*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Opaque			
35	Midi	118210	5708932396172
35	Maxi	118240	5708932396233
50	Midi	118220	5708932396202
50	Maxi	118250	5708932396264
Transparent			
35	Maxi	118270	5708932396295
50	Maxi	118280	5708932396325



Les poches hospitalières Sensura®



Sensura® Post-Op 1 pièce Stérile[◇]

Boîte de 5

Ø (mm)	Taille	Réf
Transparent		
70	680 ml	190100
100	725 ml	190110



Sensura® Visio Magnum 1 pièce*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Transparent			
≤ 10/76	630ml	190040	5708932468787



Sensura® Post-Op 1 pièce Non Stérile[◇]

Boîte de 10

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Transparent			
70	680 ml	190200	5708932971911
100	725 ml	190210	5708932971898



Sensura® Click Magnum 2 pièces*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
Opaque			
40	Maxi	190400	5708932976336
50	Maxi	190410	5708932976268
60	Maxi	190420	5708932976190
Transparent			
40	Maxi	190500	5708932976114
50	Maxi	190510	5708932976077
60	Maxi	190520	5708932976022

Les supports Sensura®

Sensura® Click Standards*

Boîte de 10

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
Standard			
40	≤ 10-35	100110	5708932341356
50	≤ 10-45	100210	5708932341370
60	≤ 10-55	100310	5708932341394
70	≤ 10-65	100410	5708932387736
X-pro			
40	≤ 10-35	100150	5708932406710
50	≤ 10-45	100250	5708932406741
60	≤ 10-55	100350	5708932406772
70	≤ 10-65	100450	5708932406802



Sensura® Flex Standards*

Boîte de 10

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
Standard			
35	≤ 10-33	101010	5708932350549
50	≤ 10-48	101020	5708932350563
70	≤ 10-68	101030	5708932350587
90	≤ 10-88	101080	5708932384681
X-pro			
35	≤ 10-33	101040	5708932410137
50	≤ 10-48	101050	5708932410151
70	≤ 10-68	101060	5708932410175



Sensura® Click Convexes*

Boîte de 5

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
HP			
40	≤ 15-23	110110	5708932341295
50	≤ 15-33	110210	5708932341318
60	≤ 15-43	110310	5708932341332
70	≤ 15-53	110410	5708932387767
HP X-Pro			
40	≤ 15-23	110150	5708932402101
50	≤ 15-33	110250	5708932402125
60	≤ 15-43	110350	5708932402149
70	≤ 15-53	110450	5708932402163



Sensura® Flex Convexes*

Boîte de 5

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
HP			
35	≤ 15-23	113010	5708932350600
50	≤ 15-43	113030	5708932350617
70	≤ 15-56	113070	5708932384032
HP X-pro			
35	≤ 15-23	113040	5708932404105
50	≤ 15-43	113060	5708932404143
70	≤ 15-56	113080	5708932404167



Découvrez nos vidéos d'application



Soin des stomies avec Sensura® Mio

Poches fermées

Poches fermées 2 pièces Flex
(support standard)



Poches fermées 2 pièces Flex
(support Convexe)



Poches fermées 1 pièce



Poches fermées 2 pièces Click
(support standard)



Poches fermées 2 pièces Click
(support Convexe)



Poches vidables

Poches vidables 2 pièces Flex
(support standard)



Poches vidables 2 pièces Flex
(support Convexe)



Poches vidables 1 pièce



Poches vidables 2 pièces Click
(support standard)



Poches vidables 2 pièces Click
(support Convexe)



Poches vidables 1 pièce convexe



Poches uro

Poches vidangeables 2 pièces Flex
(support standard)



Poches vidangeables 2 pièces Click
(support standard)



Poches vidangeables 1 pièce



Prévenir les fuites

Anneau protecteur convexe



Anneau protecteur



Protéger la peau

Spray pour retrait d'adhésif



Spray de protection cutanée



Plaque de protection cutanée



Faciliter le quotidien

Brava® Support Plus



Déodorant lubrifiant



Votre **partenaire de confiance** pour vous soutenir dans la prise en charge de vos patients stomisés

Vous jouez un rôle essentiel dans la prise en charge et l'accompagnement des patients stomisés en leur apportant des conseils personnalisés et un soutien psychologique pour les aider à vivre la vie qu'ils souhaitent avec leur stomie.

Dans le cadre de notre offre exclusive Coloplast® Professional, vous pouvez bénéficier de différents services et supports d'éducation pour accéder à des informations fiables et pertinentes, rencontrer vos pairs et partager votre expertise afin d'optimiser la prise en charge et le suivi de vos patients, tout au long du parcours de soins.



Ensemble, facilitons la vie des personnes souffrant de troubles médicaux intimes

Une offre complète et structurée de services et supports d'éducation

pour vous informer, vous former à la bonne utilisation des produits Coloplast et encourager vos patients à adopter les bons réflexes



Supports d'informations

Revoir ou acquérir les fondamentaux dans le domaine de la stomathérapie :

- Guides de bonnes pratiques
- Blocs anatomiques
- Documentations produits
- Outils éducatifs patients



Site web dédié aux professionnels de santé : ColoplastProfessional.fr

Consulter des ressources en ligne accessibles 24/7 :

- Vidéos de bon usage produits
- Trucs & astuces
- Informations médicales
- Vidéos d'experts



Événements nationaux et régionaux

Partager les bonnes pratiques entre pairs, dans un environnement stimulant

Vos contacts utiles

Coloplast est à vos côtés

Les **Spécialistes Régionaux Coloplast** sont vos interlocuteurs privilégiés et répondent à vos besoins :

- Conseils sur l'utilisation des produits
- Échantillons et documentations sur demande

Le **Service Clients Coloplast** vous assiste du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 :

- Confirmation et suivi des commandes
- Informations sur les ruptures de stock et alternatives possibles & références produits
- Ouverture de comptes clients
- Envoi des catalogues produits à jour
- Litiges & réclamation produits



Pour plus d'informations, contactez Coloplast :

Téléphone : 01 56 63 18 00 | email : fr_clients@coloplast.com

Votre relais de confiance en ville

Le **Service Coloplast® Professional Conseil** offre un accompagnement personnalisé aux professionnels de santé exerçant à la ville pour les aider dans la prise en charge de leurs patients, de retour à domicile :

- Aide à la délivrance
- Demande d'échantillons gratuits
- Formation produits

Nos conseillers experts sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

- par téléphone au : 01 56 63 18 88 - Choix 1 : continence et stomie
- par e-mail à : **continence et stomie** - conseil.pro@coloplast.com



Le Service Relations Utilisateurs Coloplast : un service dédié, à l'écoute de vos patients

L'équipe de conseillers du **Service Relations Utilisateurs** est disponible pour répondre aux questions de vos patients sur leur appareillage de stomie.

Ils donnent directement à vos patients les informations nécessaires pour utiliser au mieux leurs produits et les encourager à mener la vie qu'ils souhaitent.


Les conseillers sont disponibles pour vos patients du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

- par téléphone au **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits
- par e-mail à : FR_SRU@coloplast.com
- ou sur : www.coloplast.fr/stomie



Une question ? Besoin d'aide ?

Le Service Relations Utilisateurs Coloplast avec vous au quotidien

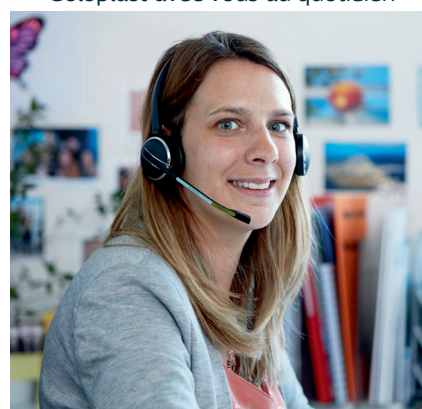

Équilibrer le bien-être des personnes avec la planète

Chaque seconde, environ 50 personnes dans le monde choisissent et utilisent l'un de nos produits pour gérer un problème de santé intime. Alors que nous aidons plus de deux millions d'utilisateurs à vivre une vie meilleure, nous produisons et expédions plus de 1,5 milliard de produits chaque année.

Chez Coloplast, nous croyons que l'utilisation des ressources de la planète pour créer des produits s'accompagne d'une grande responsabilité. C'est pourquoi nous remettons en question nos comportements et réinventons notre façon de faire des affaires pour fournir à nos utilisateurs et aux professionnels de santé, des produits et services plus durables, en appliquant les compétences d'innovation que nous avons acquises depuis plus de 60 ans.

Pour nous, il s'agit de trouver le bon équilibre qui permet aux personnes ayant des besoins en matière de soins de santé intimes de mener une vie épanouissante tout en nous concentrant sur la réduction de notre empreinte environnementale.

Avec notre mission de faciliter la vie, nous nous efforçons toujours de fournir à nos utilisateurs les meilleurs produits et services de leur catégorie et



de veiller à ce que les utilisateurs existants et les nouveaux aient accès aux soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent.

Dans le même temps, avec notre stratégie d'entreprise, Strive25, nous avons l'ambition de réduire nos émissions et de minimiser l'empreinte environnementale de nos produits et emballages tout en opérant de manière responsable.

Grâce à notre approche équilibrée, nous avons de grandes ambitions pour le bien-être des personnes et de la planète.

Faits marquants de notre parcours en matière de développement durable en 2023/24 :



Réduction de 24%
Des émissions du
scope 1 et 2 depuis
2018/19



77% des déchets de
production recyclés,
atteignant ainsi notre
objectif de 2025.



100 des fournisseurs qui
émettent le plus de CO₂ sont
engagés dans le cadre de notre
programme de développement
durable des fournisseurs

Nos ambitions et notre progression

Notre mission

Faciliter la vie des personnes qui souffrent de troubles physiques intimes



Notre priorité pour 2025

Amélioration des produits et des emballages



Notre priorité pour 2025

Réduire les émissions



Notre engagement continu

Opérer de manière responsable



33,5 millions d'euros d'investissements en dépenses d'exploitation et d'investissement engagés au cours de la période de Strive25.

Engagements	Ambitions pour 2025	2023/24
-------------	---------------------	---------

Domaines prioritaires de Strive25

Amélioration des produits et des emballages	90 % of packaging recyclable	74%
	80 % of packaging consisting of renewable materials	68%
	75 % of production waste recycled	77%

Réduction des émissions	Réduction de 100 %* des émissions de scope 1 et 2 d'ici 2030	27%
	100% d'énergie renouvelable	83%
	Des voitures de société 100 % électriques d'ici 2030	11%
	Réduction de 50 %* des émissions de scope 3 par produit d'ici 2030	3%
	10 % de réduction* des voyages en avion, puis gel	50%
	Limite de 5 % sur les marchandises transportées par avion	2%

* À partir de 2018/19

Un engagement continu

Opérations responsables	100 % de cols blancs formés au Code de Conduite	99%
	2.0 Fréquence des blessures avec arrêt de travail (en parties par million)	2.1
	40 % de femmes cadres supérieurs (VP+) d'ici 2030	28%
	75 % de part d'équipes diversifiées	56%
	Score d'engagement supérieur à la référence de l'industrie	8.1

Conformément aux recommandations de l'ANSM pour la publicité des dispositifs médicaux : "Les allégations/ résultats ou propriétés revendiquées à des fins promotionnelles doivent être étayées par des données qui permettent de justifier objectivement ces revendications.

Références

1. Etude QoL MIO (2022). Rapport clinique P155, P158, P255. Evaluation de la Qualité de Vie des patients nouvellement stomisés, ayant des effluents liquides (jéjuno, iléo, colostomie droite, urostomie) et utilisateurs de SenSura Mio. Etude observationnelle, prospective, multicentrique. 195 patients inclus (dont 52 patients urostomisés). Critère principal : score STOMA-QoL (allant de 0 à 100 : meilleure qualité de vie) à 3 mois après la sortie d'hôpital. Résultats : moyenne Stoma-QoL=59 (57 pour les entérostomisés et 64 pour les urostomisés). Tableau 114, tableau 67, tableau 68
2. Etude CP242 (2013). Rapport clinique P54-55,P63. Etude de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over, Sensura® Mio 1P vidable vs Sensura®. 183 patients iléostomisés. Critère principal : fuites sous le support. Résultats : Sensura® Mio est non-inférieur à Sensura® (50% des patients utilisateurs de Sensura® Mio n'ont présenté aucune fuites vs 59% avec Sensura®. IC à 95% avec OR 0,69 [0,56 ; 0,83]). Sentiment de Sécurité (Très bon/Bon : 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). S'adapte à la morphologie péristomiale (Très bon/Bon : 86% des patients avec SenSura Mio vs 69% avec SenSura ; p<0.001) et Suit les mouvements du corps (Très bon/Bon : 84% des patients avec SenSura Mio vs 65% avec SenSura ; p<0.001). Gêne liée aux odeurs (Pas du tout/Un peu : 91% avec Sensura Mio vs 90% avec Sensura (ns)).
3. Etude CP243 (2013). Rapport clinique P41-44, P56. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click.130 patients iléostomisés. Critère principal : préférence patient. Résultats : 65 % des patients ont préféré SenSura Mio Click (p=0.002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (Très bon/Bon : 91% avec SenSura Mio Click vs % 80 avec SenSura Click ; p<0.001) Pas de fuite au niveau du couplage rapporté par 93 % et 86 % des patients respectivement avec SenSura Mio Click et SenSura Click (ns)
4. Etude CP219, (2012). Rapport clinique P26, P35. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs 5 dispositifs de référence. 122 patients colostomisés. Critère principal : degré de fuites sur une échelle de 0 à 25 (0 : aucune fuite ; 25 : fuite maximale). Résultats : moyenne de 3,8 avec SenSura Mio contre 3,4 ; p=0.042. S'adapte à la morphologie péristomiale (Très bon/Bon : 77% des patients avec SenSura Mio vs 63% avec les dispositifs de référence ; p=0.001) et Suit les mouvements du corps (Très bon/Bon : 79% des patients avec SenSura Mio vs 70% avec les dispositifs de référence ; p=0.002)
5. Hoefloek J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017 Jan/Feb.
6. Virgin-Elliston T, Nonboe P, Boisen EB, Koblauch H. Evaluating the Performance and Perception of a Stoma Bag Full-Circle Filter in People with a Colostomy or an Ileostomy-Two Randomized Crossover Trials. Healthcare (Basel). 2023 Jan 28;11(3):369. Etudes cliniques monocentriques comparatives, randomisées en cross-over. Etude 1 : Sensura® 1P vidable avec le nouveau filtre circulaire 360° vs le double filtre standard. 20 patients iléostomisés rapportant des gonflements de la poche au moins hebdomadaire. Critère principal : Fréquence de gonflement de la poche. Résultats : gonflement de la poche rapporté par les patients pour 55% des poches Sensura® avec le double filtre standard vs 26% avec le filtre circulaire 360°. Etude 2 : Sensura® 1P fermée avec le nouveau filtre circulaire 360° vs le double filtre standard. 20 patients colostomisés rapportant des gonflements de la poche au moins hebdomadaire. Critère principal : Fréquence de gonflement de la poche. Résultats : gonflement de la poche rapporté par les patients pour 23% des poches Sensura® avec le double filtre standard vs 11% avec le filtre circulaire 360°. Délai avant gonflement de la poche rallongé de 82% (p=0.0001)Etude 2 : Sensura® 1P fermée avec le nouveau filtre circulaire 360° vs le double filtre standard. 20 patients colostomisés rapportant des gonflements de la poche au moins hebdomadaire. Critère principal : Fréquence de gonflement de la poche. Résultats : gonflement de la poche rapporté par les patients pour 23% des poches Sensura® double filtre standard vs 11% avec le filtre circulaire 360°, correspondant à une réduction de 52% des gonflements de la poche (p<0.0007). Délai avant gonflement de la poche rallongé de 74% (p=0.0001)
7. Etude CP232 (2014). Rapport clinique P42. Etude clinique comparative de non-infériorité, randomisée, en cross over. SenSura Mio Convex vs SenSura Convex. 129 patients iléostomisés. Critère principal : Degré de fuites sur une échelle de 0 (pas de fuites) à 32 (fuites maximales). Résultats : Le degré moyen de fuites était diminué pour SenSura Mio (5,1/32 vs 5,8 avec SenSura ; p=0,049). Capacité à suivre les mouvements du corps (Très Bon/Bon : 88% des patients avec SenSura Mio respectivement vs 58% avec SenSura (p<0.001). Les supports SM Convexe Fit sont similaires aux supports SM Convexe.
8. Etude CP343 (2023). Rapport clinique P22-23. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click vs SenSura Mio avec le nouveau Click. 47 patients entérostomisés. Critère principal : Fuites à travers le couplage mécanique. Résultats : Pas de différence significative entre SenSura Mio Click et le nouveau Click (15% de poches ayant eu des fuites avec le nouveau Click vs 24% ; p=0,164). Sentiment de sécurité (Tout à fait d'accord/D'accord : 90% des patients se sentent en sécurité en utilisant le nouveau Click SenSura Mio ; p<0.001) 69% des patients sont Très D'accord/D'accord que le nouveau Click nécessite une pression minimale pour être appliqué. 72% des patients sont Très D'accord/D'accord que le nouveau Click nécessite moins de pression pour être appliqué par rapport à l'ancien Click (p<0,001)

9. Enquête de satisfaction sur le nouveau couplage Click Sensura Mio. OC Expansion project, Iris & Uro Report on data collected in USA, Septembre 2023 P10. 15 soignants et 15 patients entérostomisés. Préférence avec le nouveau Click : Plus préféré/Préféré pour 80% des soignants et 73% des patients, moyenne 77% [95%CI: 58%-90%] par rapport à Hollister CeraPlus; Plus préféré/Préféré pour 93% des soignants et 87% des patients, moyenne 90% [95%CI: 73%-98%] par rapport à Convatec Natura; Plus préféré/Préféré pour 87% des soignants et 80% des patients, moyenne 83% [95%CI: 65%-94%] par rapport à B.Braun Flexima. Facilité d'utiliser le nouveau couplage Click (Très facile/Facile pour 80% des soignants et 80% des patients). Facilité d'appliquer la poche sur le support avec le nouveau Click (Très facile/Facile pour 93% des soignants et 100% des patients) Facilité de manipuler la poche sur le support avec le nouveau Click (Très facile/Facile pour 80% des soignants et 80% des patients)
10. Claims support study V1. OC Expansion project, Iris & Uro data collected in USA, Septembre 2023. P8,P9 15 soignants et 15 patients entérostomisés. Facilité de verouiller la bague de couplage sur le support avec le nouveau Click (Très facile/Facile pour 93% des soignants et 80% des patients) Facilité d'appliquer la poche sur le support avec le nouveau Click (Très facile/Facile pour 93% des soignants et 100% des patients)
11. Lacuna OC Choices & aesthetics study, 2022. Coloplast Market research, Data on file, page 2, PM-30774.
12. Aurora project - SenSura Mio in black product evaluation, février 2025 V1. Enquête de satisfaction internationale (UK, DE, FR, NL, IT, NO, FI) de novembre 2024 à janvier 2025 auprès de 305 patients stomisés utilisateurs de SenSura Mio en noir en 1-pièce support plat ou convexe depuis au moins 4 semaines. 80% des patients sont Tout à fait d'accord/D'accord que SenSura Mio en noir leur donne un sentiment de confiance (IC95% [75;85]).
13. Cf. notice d'utilisation
14. Summative Usability Test Report SenSura Mio Baby and Brava Baby Adhesive Remover, Test d'utilisation réalisé par 15 stomathérapeutes spécialisées en pédiatrie et 14 parents d'enfants stomisés. 100% des évaluateurs estiment que SenSura Mio Baby facilite la réinstillation (N=17). Tableau P15 P,16 ; 100% des évaluateurs estiment SenSura Mio Baby Très bon/Bon concernant la douceur (N=21). Tableau 5 P15 ; Les évaluateurs estiment que le système de vidange est facile à ouvrir (86%,N=28), facile à vider (93%,N=28) et facile à fermer (92%,N=24). Tableau 5 P14
15. Summative usability test report – SenSura Mio Kids, août 2018, Test d'utilisation réalisé par 15 stomathérapeutes spécialisées en pédiatrie et 14 parents d'enfants stomisés. 92% des évaluateurs estiment que le support de SenSura Mio Kids s'adapte Très bien/ Bien à la morphologie des enfants. Tableau 5 P10 ; 71% des évaluateurs estiment que l'adhésif en forme d'étoile donne plus de flexibilité sur le positionnement comparativement aux supports de forme standard. Tableau 5 P10
16. Design of test Method Report, document number: VV-0095458, juillet 2015. Absorption mesurée selon méthode interne QMS3.2.96 = mesure de la quantité de serum physiologique absorbée à 2h et à 24h
17. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 64% des iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l'anneau protecteur Brava : IC 95% [0.524; 0.737]. Page 11.
18. Verification Laboratory test, document number: VV-0290175, juin 2021. Maintien de l'épaisseur lors de l'étirement mesurée selon méthode interne TM0070 = mesure de la différence d'épaisseur avant et après étirement. Test 7.2
19. Leakage test of competitors rings, TM7064. Données internes Coloplast. VV-0283280 v3.0, December 2019. Test réalisé sur de la peau de cochon. Après 24h d'incubation en contact avec des effluents, l'anneau Brava a gonflé de 6,1% de sa surface totale. (p<0,0001). P7
20. Enquête de satisfaction sur la pâte sans alcool Brava menée auprès de 168 participants français (colo, iléo et urostomisés) en 2016. Objectif : Evaluer la satisfaction de la pâte sans alcool Brava auprès de ses utilisateurs en conditions réelles d'utilisation. 95.8% (91/95) sont satisfaits/très satisfaits du respect de la peau qu'elle confère, rapport d'enquête page 9.
21. Laboratory Report: Report for test methods Veeva Doc. No. VV-0050511, Section 6.4, p 5 –20 flacons ont été pesés après les avoir vidés de leur contenant et comparés au poids de 20 flacons vides qui n'ont pas été remplis. La différence de poids observée est faible. (0,6 g en moyenne)
22. Environmental Assessment Adhesive remover propellant, Veeva Doc. No. VV-0036431 : La technologie "bag on valve" utilisée pour propulser l'anti-adhésif Brava a été choisie pour éviter l'utilisation d'hydrofluorocarbures (HFC) qui sont de puissants gazs à effet de serre.
23. Données de biocompatibilité (potentiel de sensibilisation évalué conformément à la norme EN ISO 10993-5 et EN ISO 10993-10)

Indications et remboursement :

- * **Protection cutanée Brava® (poudre, plaque)** : Dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. Poudre : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.
- ♦ **Protection cutanée Brava® (spray, lingette)** : Dispositif médical destiné à protéger la peau saine des effets néfastes des effluents et des adhésifs, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 3,5 kg en raison de leur peau immature. Spray : éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol hautement inflammable.
- ♦ **Protection cutanée Brava® (crème)** : Dispositif médical destiné à la protection de la peau intacte autour de la stomie exposée aux effluents intestinaux, à l'urine et au pus, de classe I, non stérile, marqué CE.
Renforcements périphériques du support (Pâtes : Pâte en tube Brava® sans alcool 60g* et 25g♦, Pâte en barrette Brava® sans alcool*, Coloplast pâte en tube*) : Dispositif médical destiné à remplir les cavités et les plis de la peau saine autour de la stomie. Elle crée un joint entre la stomie et le support adhésif de la poche de stomie et protège la peau des effluents, de classe I, non stérile, marqué CE. Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection
- * **Renforcements périphériques du support Brava® (anneaux)** : Dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Ce produit est destiné au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale, de classe I, non stérile, marqué CE. Anneau modelable Brava® : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.
- ** **Renforcements périphériques du support Brava® (Support Plus)** : Dispositif médical destiné à maintenir les bords du support adhésif en fournissant un maintien supplémentaire à la peau péristomiale intacte, de classe I, non stérile, marqué CE.
- ♦ **Retrait d'adhésif Brava® (lingette)** : Dispositif médical destiné au retrait des adhésifs médicaux de la peau intacte, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 3,5 kg en raison de leur peau immature.
- ♦ **Retrait d'adhésif Brava® Baby (huile)** : Dispositif médical destiné au retrait des adhésifs médicaux de la peau intacte, de classe I, non stérile, marqué CE. En l'absence de facteurs de complication, le produit peut être utilisé pour les nourrissons prématurés de plus de 30 semaines de grossesse jusqu'à l'âge de 6 mois.
- * **Retrait d'adhésif Brava® (spray)** : Dispositif médical destiné à retirer les adhésifs médicaux de la peau intacte, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 3,5 kg en raison de leur peau immature. Éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol extrêmement inflammable. Les sprays pour retrait d'adhésif sont remboursés uniquement pour le décollement des supports de poches.
- ♦ **Flacon et dosette de déo lubrifiant Brava®** : Dispositif médical destiné à désodoriser et à lubrifier le contenu d'une poche de stomie, de classe I, non stérile, marqué CE.
- ♦ **Lingettes intimes Brava®** : Dispositif médical destiné à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniers ou sondes urinaires), de classe I, non stérile, marqué CE.
- * **Ceinture & Ceinture Mio** : Dispositif médical destiné à maintenir la poche de stomie et le protecteur cutané dans la position appropriée, de classe I, non stérile, marqué CE.
- * **Sensura® Mio (standard, uro, haut débit, post-op réfs non stérile, convexe)** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. Conditionnement par 10 non remboursé (sauf Sensura® Mio : Poche haut débit, poche 1 pièce convexe, support standard).
- * **Sensura® Mio kids** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. Le dispositif est indiqué pour les bébés à partir de 6 mois et les enfants jusqu'à 4 ans.
- * **Sensura® Mio Baby (Poche)** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe IIa stérile, marqué CE 2460. Support : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe IIa, marqué CE 2460. Sensura® Mio Baby ne peut pas être utilisé chez les nourrissons prématurés de moins de 30 semaines de gestation, du fait de leur peau immature.
- * **Trousse d'irrigation, Cone d'irrigation + Manchons d'irrigation Sensura® Mio** : Dispositif médical destiné à introduire de l'eau dans le colon par la stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. N'utilisez pas le set d'irrigation si vous avez la diarrhée.
- * **Alterna® pédiatrique, Alterna® mini poche** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I,

non stérile, marqué CE. Le produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.

* **Easiflex® pédiatrique** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.

* **Sensura®, Sensura® Uro, Sensura® Visio Magnum et Sensura® Magnum** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I, non stérile, marqué CE.

♦ **Coloplast® connecteurs uro** : Dispositif médical destiné à fournir une connexion entre une poche d'urostomie à une poche de nuit. De classe I, non stérile, marqué CE.

♦ **Clamp** : Dispositif médical destiné à assurer la fermeture, l'ouverture, la vidange et/ou la refermeture des poches munies d'une extrémité ouverte. De classe I, non stérile, marqué CE.

♦ **Alterna® Post-op, Sensura® Post op, Sensura® Mio Post op** : Dispositif médical destiné au recueil passif des effluents d'une stomie, de classe I, stérile, marqué CE 2460.

*** **Coloplast® Collecteur Express** : Dispositif médical destiné à la collecte passive des effluents des fistules et des plaies ou d'une stomie haut débit, de classe I, non stérile, marqué CE.

* **Coloplast® Micro-système uro, Poche de recueil de nuit pour urostomisés** : Dispositif médical destiné à recueillir passivement l'urine, de classe I, non stérile, marqué CE.

♦ **Fistula® & Coloplast® Accès Drain** : Dispositif médical destiné à l'appareillage des fistules et plaies localisées dans la région abdominale et à collecter passivement les effluents de la fistule ainsi que les exsudats de la plaie pour faciliter la cicatrisation en milieu humide, de classe I, non stérile, marqué CE. Le système complet Fistula présente un risque accru d'infection chez les personnes immunodéficientes ou sous traitement immunosuppresseur.

♦ **Coloplast® Poche de drainage** : Dispositif médical destiné à couvrir les drains de plaie/fistule dans la région abdominale et à collecter passivement les effluents, notamment le sang, la lymphe et les exsudats des fistules et plaies infectées, de classe I, stérile, marqué CE 2460.

* **Poches Conveen®** : Dispositif médical destiné à recueillir passivement l'urine, de classe I, non stérile, marqué CE.

* **Conveen® Attaches de jambe** : Dispositif médical destiné au maintien en place d'une poche à urine ou une sonde à demeure, en la fixant sur la cuisse ou sur l'abdomen, de classe I, non stérile, marqué CE.

* **Connecteur Y** : Dispositif médical destiné à être utilisé pour le raccordement de 2 ou 3 tubes au système de collecte, de classe I, stérile, marqué CE 2460

Pour tous les produits sus-mentionnés : Fabricant : Coloplast A/S

* **Accessoires poches à urine (Filets)** : Dispositif médical destiné à la fixation de poches à urine de jambe portées par les personnes disposant de sonde urinaires temporaires ou permanentes et d'étuis péniens, de classe I, non stérile, marqué CE. Fabricant : Tytex A/S.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Intégralement remboursé pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire, porteurs de stomie dont l'abouchement est entouré d'une surface cutanée irrégulière empêchant ou réduisant l'adhésivité d'un support de poche de recueil. La prescription est réalisée par un médecin ou par un infirmier. Préalablement à toute prescription initiale, le patient ou son aidant reçoit une formation à l'utilisation de ces dispositifs médicaux, réalisée avant la sortie du patient de l'établissement de santé ayant réalisé la stomie. Cette formation est réalisée dans l'idéal par un infirmier entéro-stomathérapeute. Renforts périphériques Brava® Supports Plus, les 20 unités : prix limite de vente au public 25,70€ TTC, remb. Séc. Soc. 25,70€.

*** Intégralement remboursé pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire, système collecteur vidangeable pour selles liquides à haut débit, Coloplast, Collecteur Express, les 10 unités : prix limite de vente au public 44,79 € TTC, remb. Séc. Soc. 44,79 €.

♦ Produits non remboursés

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Avis de confidentialité

Notice d'informations à destination des professionnels de santé

Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danemark) et ses filiales, y compris Les Laboratoires Coloplast SAS (38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-sous-bois) et Coloplast Manufacturing France SAS (La Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson) (« Coloplast ») interagissent régulièrement avec des professionnels de santé et d'autres tiers dans le cadre de leurs activités commerciales. Ces interactions impliquent la collecte et le traitement de données personnelles émanant de professionnels de santé et de tiers. Coloplast est responsable de la collecte et du traitement de ces données et veillera à ce que les données personnelles soient traitées avec soin et conformément aux lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de ses interactions avec les professionnels de santé et les autres tiers, Coloplast traite les informations personnelles qui lui sont fournies. Il peut s'agir du nom, des coordonnées, du titre, de la spécialité, du lieu de travail, du numéro RPPS ou de tout autre numéro d'enregistrement professionnel (« les données personnelles »). Nous traitons les données personnelles afin de communiquer les informations demandées et de poursuivre notre intérêt légitime à interagir avec les parties externes et à améliorer notre communication. L'article 6(1)(b) relatif à l'exécution du contrat et l'article 6(1)(f) relatif aux intérêts légitimes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE constituent le fondement juridique sur la base duquel Coloplast traitera vos données personnelles.

Les employés de Coloplast traiteront vos données exclusivement aux fins spécifiées. Dans certains cas, Coloplast utilisera des systèmes fonctionnant sur des plateformes tierces ou impliquera des tiers dans le traitement des données (par ex. Salesforce et Oracle). Tout transfert de données à des tiers sera effectué uniquement aux fins spécifiées et sera géré conformément aux instructions de Coloplast. Les données pourront être collectées et traitées à travers le réseau Coloplast, ce qui peut impliquer un traitement de données personnelles en dehors de l'espace économique européen. Dans de tels cas, un niveau de protection des données adéquat sera garanti par les tiers, par des clauses contractuelles types sur la protection des données adoptées par l'UE, ou un mécanisme de certification approuvé européen sur la protection des données. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le délégué à la protection des données de Coloplast (coordonnées ci-dessous).

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps qu'il existe une relation active entre vous et Coloplast, ou si nous envisageons d'établir une telle relation. La relation sera considérée comme inactive en l'absence de communication entre vous et Coloplast pendant deux ans.

Quels sont mes droits ?

Vous pouvez à tout moment écrire à privacyrequests@coloplast.com afin de demander :

- l'accès à vos données ;
- la rectification ou la suppression de vos données ;
- les restrictions concernant le traitement de vos données ;
- à recevoir vos données dans un format ouvert et lisible par machine (portabilité des données) ;
- le retrait des consentements que vous avez donnés à Coloplast pour le traitement de vos données.

L'exercice des droits ci-dessus n'entraînera aucune conséquence négative pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Coloplast traite les données personnelles, rendez-vous sur www.coloplast.com/global/privacy-notice.

Coloplast a nommé un délégué à la protection des données. Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles par Coloplast, vous pouvez contacter par e-mail notre délégué à la protection des données (dataprotectionoffice@coloplast.com), ou par courrier adressé à Coloplast, à l'attention du Délégué à la protection des données. Toute réclamation concernant le traitement des données personnelles par Coloplast doit également être adressée à notre délégué à la protection des données. Vous avez également le droit de porter réclamation auprès de l'autorité de surveillance compétente si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont Coloplast traite les réclamations. En France, l'autorité compétente est la CNIL (www.cnil.fr).

Comment contacter Coloplast ?

Si vous avez des questions, contactez Coloplast par e-mail à fr_contactpro@coloplast.com, ou par courrier à : Départements commercial et/ou marketing - Laboratoires Coloplast, 38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-sous-Bois

L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.

Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public. Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies. Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant d'altérations physiques intimes.

Document réservé à l'usage de professionnels de santé.

Soins des stomies | Continence | Soins des plaies | Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast, SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : 38 rue Roger Salengro - 94120 Fontenay-sous-Bois - France
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL : 312 328 362
SIREN : 312 328 362 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

www.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 110S - PM-28435 - Juillet 2025 - PS

